

FRED EASYPORT PLUS

Der kleine, leistungsstarke Defibrillator für jedermann, jederzeit, überall




SCHILLER
The Art of Saving Lives

FRED EASYPORT PLUS

Der ideale Begleiter für unterwegs

FRED easyport plus – der
Taschendefibrillator von
SCHILLER:

- 780 Gramm,
46x150x143 mm (HxLxB)
- als AED First, Auto oder
Manual erhältlich
- HLW-Feedback-Optionen

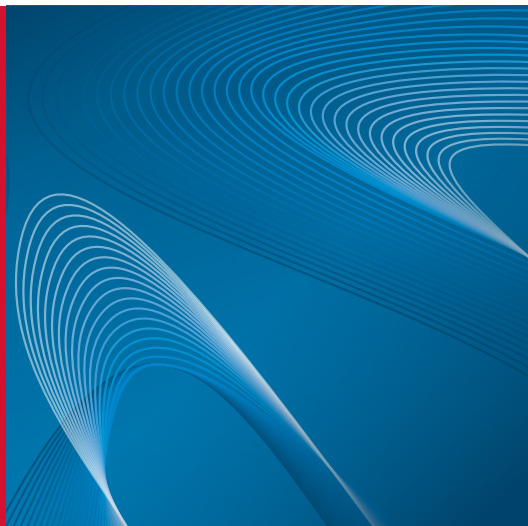

LEICHT UND KOMPAKT

Der Taschendefibrillator FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und vereint kompakte Grösse und umfangreiche Funktionalität in einem.

Das Gerät ist je nach Zubehörumfang mit einer passenden Tragetasche im Standard- oder Kleinformat erhältlich.

BEI BEDARF SOFORT SCHOCKBEREIT

Dank einem schnellen Analysesystem lädt FRED easyport plus systematisch die erforderliche Energie, um den Schock bei Empfehlung des Geräts sofort abzugeben.

HLW-FEEDBACK

Defibrillation alleine reicht nicht aus. Um die Organe mit genügend Sauerstoff zu versorgen, muss die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) korrekt durchgeführt werden, um die Durchblutung wiederherzustellen.

So unterstützt Sie FRED easyport plus dabei, die Herzdruckmassage effizient auszuführen:

- Kompressionstiefe, -frequenz und Entlastung werden durchgehend angezeigt.
- Das Metronom gibt einen regelmässigen Rhythmus vor.

Mit dem ARGUS LifePoint-Sensor wird der Ersthelfer während der Herzdruckmassage durch Sprachanweisungen und farbkodierte Meldungen auf der Anzeige angeleitet.

FLEXIBLES

BATTERIENKONZEPT

Das Gerät kann mit einem wiederaufladbaren Akku oder mit Einweg-Batterien betrieben werden. Das externe Ladegerät kann zwei Akkus gleichzeitig aufladen.



INFORMATIONEN- ÜBERWACHUNG

FRED easyport plus zeichnet Interventionsdaten auf, sodass Ärzte und Notärzte einen besseren Überblick über den Zustand des Patienten erhalten.

- ❖ HLW-Qualität
- ❖ EKG-Kurve
- ❖ Impedanzkurve
- ❖ Ereignisse

ABRUF VON INFORMATIONEN

Dank Wi-Fi- und USB-Option können gespeicherte Dateien ganz einfach im SCHILLER-Datenverwaltungssystem SEMA eingesehen und verwaltet werden.

FINDEN SIE DAS GERÄT, DAS ZU IHNEN PASST

FRED easyport plus ist in drei Ausführungen verfügbar, sodass für jedes Benutzerniveau das passende Gerät erhältlich ist.



AED FIRST

Die halbautomatische Version von FRED easyport plus hat ein graues Gehäuse. Ein Schock wird bei dieser Ausführung erst abgegeben, nachdem der Ersthelfer diesen bestätigt hat.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.



AED AUTO

Bei der vollautomatischen Version von FRED easyport plus muss der Ersthelfer nichts bestätigen. Nach der Analyse bestimmt das Gerät, ob ein Schock erforderlich ist. Der Schock wird bei Bedarf automatisch abgegeben.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.



AED MANUAL

Der manuelle Defibrillator FRED easyport plus hat ein rotes Gehäuse. Bei dieser Version können Ärzte und Rettungssanitäter in den manuellen Modus umschalten. Dank der EKG-Anzeige kann eine medizinische Fachperson entscheiden, ob ein Schock nötig ist.



ELECTRODES
FRED PA-1

For Adults Pro Life Class 1
Type 2, CARDIOVIT AT-101 (easy)

RFID

ADULT

PLUG AND APPLY ELECTRODES

SCHILLER
FRED easyport plus

KLEIN UND LEISTUNGSSTARK

FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und gibt Schocks mit bis zu 200 Joule ab. Die Multipulse Biowave-Technologie sorgt für einen effektiven, sicheren Defibrillationschock und gleichzeitig für weniger Schäden am Myokard.

JEDE SEKUNDE ZÄHLT

Sind die Defibrillationselektroden bereits vorangeschlossen, beginnt die Rhythmusanalyse sofort, sodass die Zeit bis zur Schockabgabe reduziert wird.

EKG-SIGNALMODUS

Der EKG-Signalmodus mit 2-adrigem Patientenkanal kommt zum Einsatz, wenn keine Defibrillation angezeigt ist und der Herzrhythmus des Patienten durch medizinisches Personal überwacht werden muss.

STETS EINSATZBEREIT

FRED easyport plus führt regelmäßige Selbsttests durch, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert. Der Status des Geräts wird mit der blinkenden Ein-/Aus-Taste angezeigt.

DATENÜBERTRAGUNG AN SEMA

Interventionsdaten lassen sich über Wi-Fi oder USB übertragen, damit sie vom medizinischen Fachpersonal überprüft werden können.

LANGLEBIG

FRED easyport plus ist IP44-klassifiziert und damit gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.





TASCHEDEFIBRILLATOR

FRED easyport plus misst gerade mal 150 × 143 Millimeter – dieses Foto zeigt das Gerät in Originalgrösse (1:1)!

FÜR ALLE UMGEBUNGEN GEEIGNET

FRED easyport plus besitzt einen grossen LCD-Farbbildschirm, welcher die Helligkeit automatisch anpasst – alle Informationen sind so immer gut sichtbar.

INTUITIVER MODUSWECHSEL BEI KINDERN

Drücken Sie einfach diese Taste, um den Patientenmodus zu ändern. Andere Elektroden sind nicht erforderlich.

HLW-FEEDBACK

Das integrierte Metronom gibt den korrekten Rhythmus vor und führt den Ersthelfer während der Intervention.

Zusätzlich leitet der ARGUS LifePoint-Sensor den Ersthelfer mit grafischen und Sprachanweisungen an und sorgt damit für eine effektive Herzdruckmassage.

OPTIMIERTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Klare grafische Instruktionen und Sprachanweisungen führen den Ersthelfer in drei einfachen Schritten sicher durch die Intervention.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

